

SafeAire™ S- Abluftabzüge

SafeAire™ S-1000, SafeAire™ S-1200, SafeAire™ S-1500, SafeAire™ S-1800

SafeAire™ -S Abzüge sind:

- freistehende Abzüge mit offenem oder mit geschlossenem Untergestell
- Auftischabzüge auf Labortische aufstellbar

Die S-Abzüge werden komplett montiert geliefert so dass die ohne zusätzliche Montagearbeiten aufstellbar, und an das hauseigenem Abluftsystem anschließbar sind..





Freistehender SafeAire S-1200 Abluftabzug mit offenem Gestell (Gesamthöhe: 240 cm)

Die Standardausrüstung der SafeAire™ S Abzüge:

- mit Epoxydharz beschichtetes Stahlkonstruktionsgehäuse
- widerstandsfähiges Sicherheitsglasschiebefenster mit Gegengewicht
- widerstandsfähiges Seitenfenster aus Sicherheitsglas
- säurebeständige doppelte Rückwand um durch eine horizontale Luftströmung die Schadstoffe sicher von der Arbeitsfläche zu entfernen
- integriertes, nicht reflektierendes Beleuchtungssystem
- Bypass-System für korrekte Luftgeschwindigkeitssteuerung
- Sicherheitspaneel für den Fall einer Explosion
- Arbeitsoberfläche aus Edelstahl, (monolithisches Steinzeug oder Polypropylen Arbeitsfläche sind Optionen)
- Abluftstutzen: 200 mm oder 250 mm Durchmesser
- Die Abzüge mit Untergestell und Unterschrank können nach Wunsch mit Wasser-, Gas-, Vakuum-, usw. Zufuhr und mit zusätzlichen Steckdosen usw. geliefert werden

SafeAire™	Maße (B x T x H) mm	
	Außen	Innen
S1000	1000 x 754 x 1500	950 x 650 x 1200
S1200	1200 x 754 x 1500	1150 x 650 x 1200
S1500	1500 x 754 x 1500	1450 x 650 x 1200
S1800	1800 x 754 x 1500	1750 x 650 x 1200

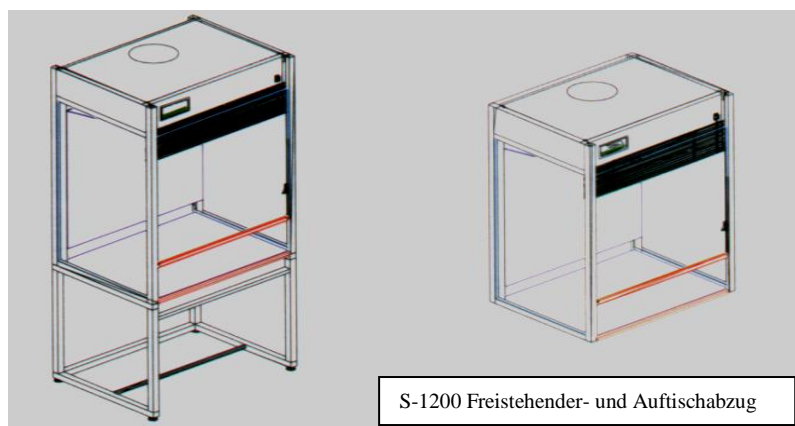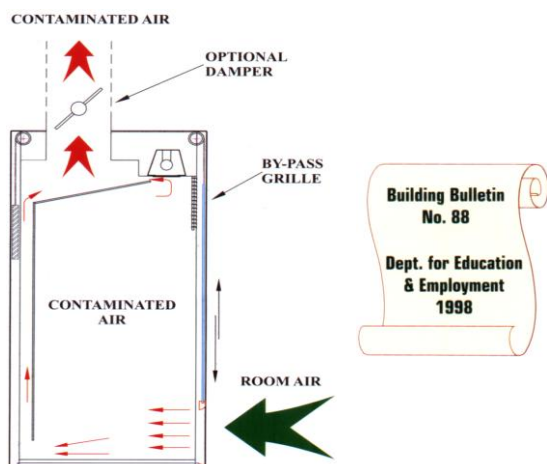

Der S-1200 wurde nach British Standard BS 7258, USA-Norm ANSI/ASHRAE 110, die Luftführung/ Strömungs- verhältnisse/ Ausbruchverhalten nach DIN 12924 getestet. Das Gerät ist mit dem CE Zeichen versehen

Änderungen vorbehalten

SAROSSY LABORTECHNIK

Postfach: 500 129 D-70331 Stuttgart Tel: 0711-900 533 67 F:0711-577 153 87
 E-Mail: info@sarossy.de sarossy@t-online.de www.sarossy.de